


Document information

Software:	realplex 2.2	
File Name:	EPPENDORF\Lorenzo\Test_030418	
Printed by:	EPPENDORF	
Created:	Apr/03/2018 12:51	
Serial No. Thermo Module:	6325 30387	
Serial No. realplex Module.:	630011465	
Acquisition Start Time:	EPPENDORF	Apr/03/2018 16:04
Acquisition End Time:	EPPENDORF	Apr/03/2018 17:31
Last updated:	EPPENDORF	Apr/03/2018 15:38
Background:	Sarstedt-20µl	Sep/12/2011 10:28
Color Calibration:	SYBR	Mar/12/2018 15:31
Test_030418	Quantification	Apr/03/2018 18:04
Inverted Data:	OFF	
Comment:		

Plate layout

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	CEWE_... 1: 1.00	CEWE_... 1: 1.00	CEWE_... 1: 1.00	CEWE_... 1: 1.00	CEWE_... 1: 1.00	CEWE_... 1: 1.00						
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC						

PCR Program

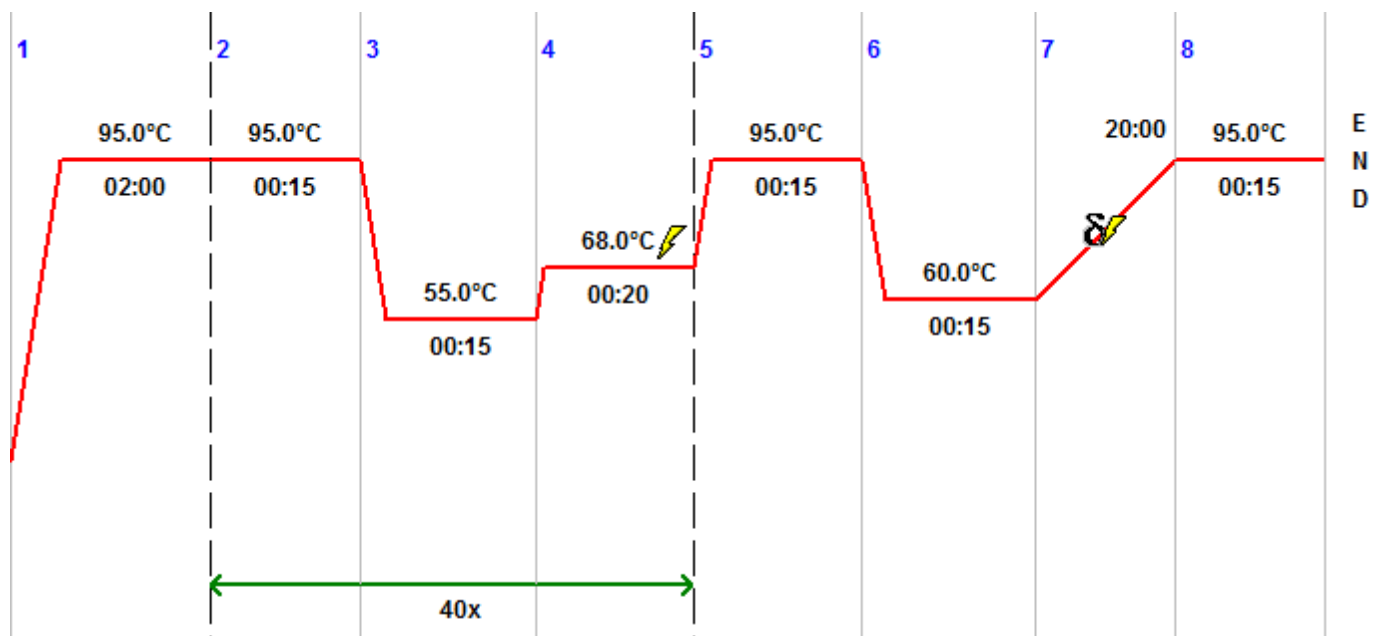


Program Header


Lid Temp	105 °C	TSP Heated Lid	Yes
Temp. Mode	Standard	Switch off lid at low block temp	No
Impulse	No	Simulate Mastercycler gradient	No

Raw Data SYBR

Fluorescence Profile

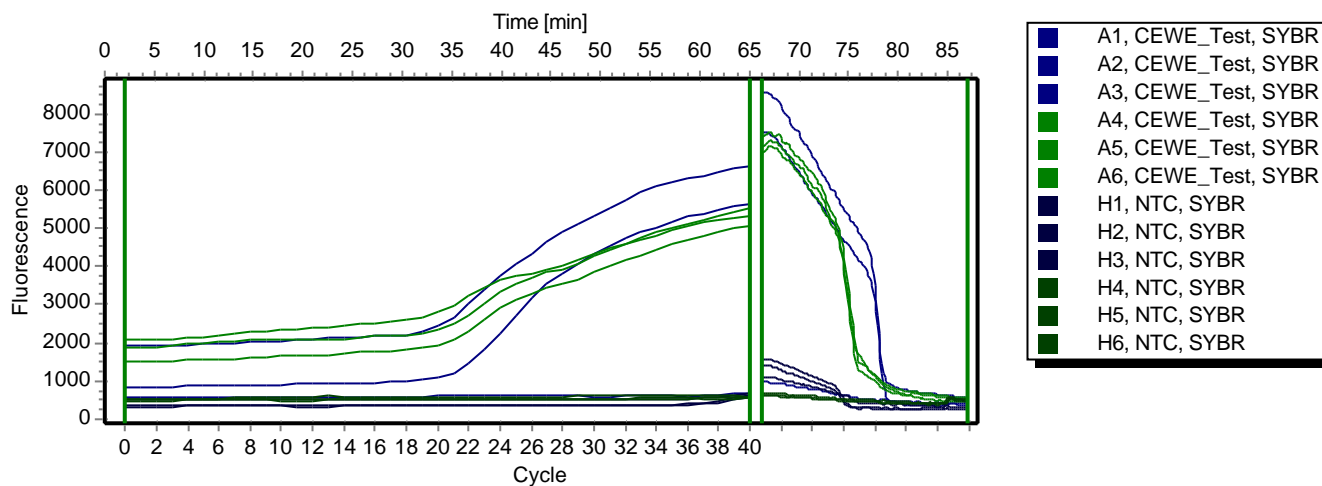


Temperature Profile

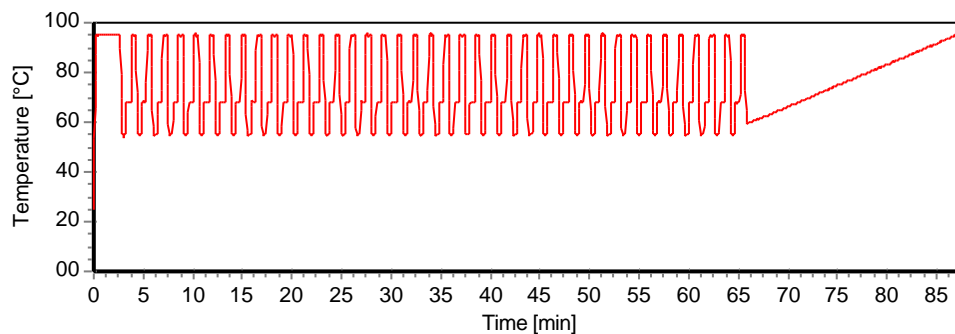

Quantification SYBR

Pos	Name	Ct SYBR	Ct Mean SYBR	Ct Dev. SYBR	Amount SYBR [Copies]	Amount Mean SYBR	Amount Dev. SYBR	Target SYBR
A1	CEWE_Test	20.92	20.24	0.97	1.00			mouse
A2	CEWE_Test		20.24	0.97	1.00			mouse
A3	CEWE_Test	19.56	20.24	0.97	1.00			mouse
A4	CEWE_Test	20.38	19.92	0.55	1.00			eimeria
A5	CEWE_Test	19.31	19.92	0.55	1.00			eimeria
A6	CEWE_Test	20.06	19.92	0.55	1.00			eimeria
H1	NTC	-			-			mouse
H2	NTC	-			-			mouse
H3	NTC	-			-			mouse
H4	NTC	-			-			eimeria
H5	NTC	-			-			eimeria
H6	NTC	-			-			eimeria

Amplification Plot

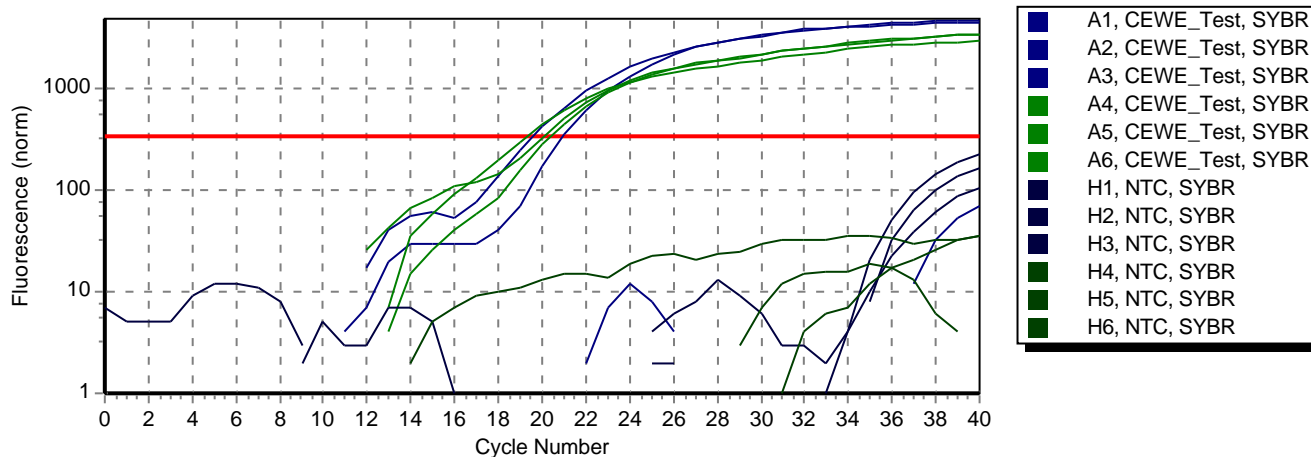

Threshold 336 (Noiseband)

Baseline automatic, Drift correction OFF

Standard curve

